
Garrison

Dental Solutions



CATÁLOGO 2020

ES

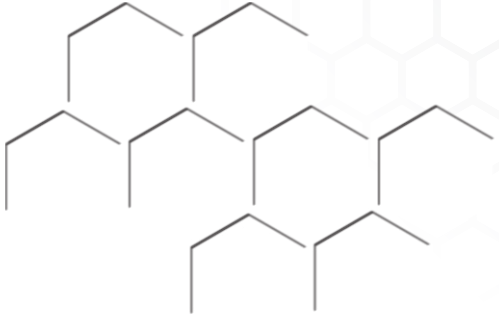


"Desde el punto de vista del tratamiento, el sistema Composi-Tight® 3D Fusion™ simplifica enormemente el trabajo. El fácil posicionamiento y la buena adherencia hacen que sea fácil de usar incluso en condiciones difíciles. La fácil eliminación de cualquier exceso al final de la restauración es otra ventaja de los anillos Composi-Tight® 3D Fusion™. El resultado es un buen punto de contacto estrecho y ajustado y anatómicamente correcto".

Dr. Martin von Sontagh, Hard, Austria



1. Situación preoperatoria.

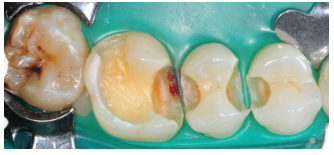

2. Eliminación de las lesiones cariosas en el área a tratar.



3. Colocación de las matrices en las cavidades mesiales del 5 y 6, en primer lugar.



4. Comienzo de la reconstrucción de la gran cavidad mesial del 6 con el anillo verde Fusion para cavidades grandes.



5. Posicionamiento simple y eficiente de los anillos.



6. Colocación y posicionamiento de las matrices a las cavidades distales / mesiales del 4 y 5.



7. Realización de las restauraciones para obtener puntos de contacto anatómicos y resistentes.



8. Restauraciones antes de terminar, después de retirar los anillos y matrices.



9. Resultado final de restauraciones de composite. Preste especial atención a la calidad de los puntos de contacto.

Índice

SISTEMAS DE MATRICES

Sistemas de Matrices
- Composi-Tight® 3D Fusion™ 2-9
- Otros sistemas de matriz seccional . . 10-12

Matrices tradicionales estilo Tofflemire
- Slick Bands™ 29

Matrices anteriores
- VariStrip™ 28

CUÑAS INTERDENTALES

Plástico
- Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedge . . 16
- WedgeWands® 17
- A+Wedge® 18

Madera
- SoftWedge™ 18

BLANQUEAMIENTO

Tiras
- Daring White™ 19-23

ACCESORIOS IMPORTANTES

Acabado y contorneado interproximal
- FitStrip™ 24-25

Pulidores
- eZr™ 26-27

Pinza
- Pinza Composi-Tight® 3D Fusion™ . . . 30
- Pinzas para la colocación de anillos . . 30
- Pinza Porta-anillos universal 30
- Composi-Tight® Pinza para matrices . . 31

Instrumentos para el punto de contacto
- Modelador de contacto PerForm™ . . . 13

Instrumento para composite
- Instrumento multifunción 32
- Más 33-34

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Comparativa de matrices 14-15
- Esterilización y limpieza 36
- Nueva tienda online 37


Todas las ofertas son válidas hasta el 31 de diciembre de 2020 ó hasta fin de existencias.
Nos reservamos el derecho de corregir errores o hacer cambios. Los precios no incluyen IVA ni gastos de envío.

¿Por qué debería usar un sistema de matriz seccional?


Sistema de tipo Tofflemire

- No permite la restauración de la anatomía proximal.
- Mal contacto en la cresta marginal
- Gran acúmulo y almacenamiento de alimentos.
- Mayor probabilidad de fracturas, interferencias oclusales, caries recurrente y periodontitis



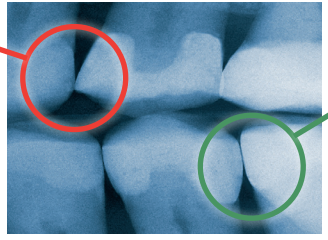



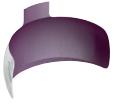

Sistema de matriz seccional Composi-Tight® 3D Fusion™

- Un sistema para todas las cavidades de clase II.
- Ahora también disponible para grandes cavidades.
- Contactos a la altura correcta del perfil.
- Sistema fácil de usar y más rápido.
- Matrices con forma anatómica.
- Los anillos permiten una separación óptima entre los dientes para contactos perfectos y apretados.
- Contactos anatómicamente correctos.

Solo Composi-Tight® 3D Fusion™ permite puntos de contacto ajustados y anatómicamente correctos



1. Coloque la banda matriz de Garrison con la pinza. Consejo: si los dientes están muy apretados, coloque el anillo durante la preparación.



2. Coloque la cuña Composi-Tight® 3D Fusion™ con pinzas para sellar también la unión gingival.




3. Coloque el anillo Composi-Tight® 3D Fusion™ con las pinzas o portas del anillo (consulte a la izquierda).

Caso clínico Composi-Tight® 3D Fusion™


Gracias a la excelente adaptación a los dientes, las correcciones en las áreas proximales ya no son necesarias.



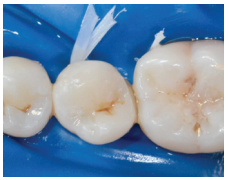

Imágenes cortesía del Dr. Amar, DDS, France

Con el anillo derecho (FX600 verde), se pueden hacer preparaciones anchas fácilmente en un solo paso.

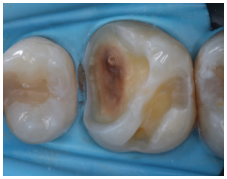



Imágenes cortesía del Dr. Nikhil Sethi, BDS (Lon) Msc (Lon), Birmingham, UK


Se necesita una técnica diferente para restaurar los dientes adyacentes ("back-to-back"): le mostraremos cómo hacerlo.*





Imágenes cortesía del Dr. Jeffrey Kelley, DDS, Zeeland, MI

Con las sugerencias de nuestros profesionales, podemos eliminar sus inquietudes de manera segura.

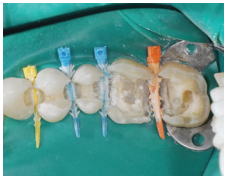



Imágenes cortesía del Dr. Mike Malone, DDS, Lafayette, LA

*Todas las declaraciones, casos clínicos y revisiones están disponibles en www.garrisondental.com/learning-center. ¿Te gustaría hablar sobre un caso práctico?

The Award Winning Composi-Tight® 3D Fusion™ Sectional Matrix System

"Las bandas matrices y los anillos de Garrison nos permiten conseguir restauraciones anatómicamente idénticas al diente natural, con puntos de contacto y áreas que posibilitan una función y una estética adecuadas."

Dr. Carlos Fernández Villares
Madrid, España

Composi-Tight® 3D Fusion™
Sectional Matrix System

NOVEDAD





El nuevo anillo verde Composi-Tight® 3D Fusion™ para preparaciones anchas.
Especialmente diseñado para preparaciones anchas. Incluso cuando falta una cúspide. Las extensiones amplias de silicona no presionan la matriz hacia la cavidad a restaurar.
Ref. FX600 (2 ud. / paquete)



El anillo naranja Composi-Tight® 3D Fusion™ ahora con extensiones retentivas.
Las extensiones de retención Ultra-Grip™ se han diseñado para evitar que los anillos se descoloquen. Además poseen una forma mejorada que facilita la apertura y la colocación de los anillos. Poseen buena retención incluso en molares con coronas clínicas más voluminosas.
Ref. FX500 (2 ud. / paquete)



El popular anillo azul 3D XR ahora se abre más fácil.
Cresta marginal reforzada en las puntas de silicona Soft-Face™. Ideal para su uso en dientes con coronas clínicas cortas o apiñados. Se queda incluso sobre los clamps del dique de goma.
Ref. FX400 (2 ud. / paquete)

Ref.	Contenido	Precio
FX600	Composi-Tight® 3D Fusion anillo ancho verde 2 ud./paquete	195,00€
FX500	Composi-Tight® 3D Fusion anillo largo naranja 2 ud./paquete	195,00€
FX400	Composi-Tight® 3D Fusion anillo corto azul 2 ud./paquete	195,00€
FXR01	Paquete de tres anillos (1 de cada tamaño)	285,00€
FXP01	Fórceps para los anillos mejorado de acero forjado	87,00€

Composi-Tight® 3D Fusion™
Sectional Matrix System

Lo que hemos mejorado

NOVEDAD
Larga vida gracias al nuevo método de producción.



Dental Advisor – Top Sectional Matrix System 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 Editor's Choice. Dental Advisor ha elegido de nuevo el sistema de matriz seccional Composi-Tight® como el mejor sistema de matriz seccional en 2019.

Matrices seccionales Composi-Tight® 3D Fusion™: ¡El sistema de matriz seccional 3D Composi-Tight® gana el premio Dental Advisor en la categoría "Mejor sistema de matriz seccional" por séptima vez consecutiva

Composi-Tight® 3D Fusion™
Sectional Matrix System



FX-KFF-00

El nuevo sistema de matrices seccionales Composi-Tight® 3D Fusion™ ofrece la solución para todas las cavidades de clase II.

¡Anatomía ideal! Las puntas de silicona extrasuave Soft-Face™ de los anillos, con su anatomía mejorada de la cresta marginal, ciñen las matrices preformadas blandas al diente para conseguir restauraciones de forma perfecta y sin movimientos.

DENTAL ADVISOR 2019 TOP AWARD WINNER
DENTAL ADVISOR TOP AWARD
SECTIONAL MATRIX

Precio: 459,00€

Todos los kits vienen con una garantía de devolución del dinero de 60 días.

Ref.	Contenido	Precio
FX-KFF-00 **Kit de introducción**	1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo corto azul, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo largo naranja, 1x Composi-Tight® 3D Fusion™ anillo ancho verde, 80x Composi-Tight® 3D Fusion™ cuñas en 4 tamaños, 70x Composi-Tight® 3D Fusion™ Matrices en 5 tamaños, 1x forceps para los anillos mejorado de acero forjado	459,00€
FX-KFF-04	como el kit de introducción Composi-Tight® 3D Fusion™ FX-KFF-00, 1x BFA-1 Pinzas para matrices (pág. 31)	585,00€
FX-KFF-01	como el kit de introducción Composi-Tight® 3D Fusion™ FX-KFF-00, 1x BFA-1 Pinzas para matrices (pág. 31) 1x TN009 Instrumento multifuncional 5 en 1 (pág. 32)	685,00€

Todos los kits incluyen una garantía de devolución del dinero de 60 días. Adquiera hoy su kit enviando un correo electrónico a info@garrisondental.net, llamando al número 800 600 721 Ó enviándonos el formulario de pedido por fax al 800 600 722.

Composi-Tight® 3D Fusion™

Full Curve Non-Stick Matrices

Se adapta a cualquier anatomía dentaria.

	Premolares	Pequeño cervical	Premolares y molares pequeños	Molares	Molares cervicales subgingival
Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™					
0,038 mm de espesor					
Ref.	**FX100**	**FX150**	**FX175**	**FX200**	**FX300**
Altura	4,4 mm	6,0 mm	5,6 mm	6,6 mm	8,7 mm
Contenido	100 ud./pa.	60 ud./pa.	100 ud./pa.	100 ud./pa.	60 ud./pa.

Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ **95,00€ por paquete**



Todos los tamaños de matrices también disponibles en un kit ...

...con 420 matrices por

FXB01 **430,00€**

...con 210 matrices por

FXB02 **235,00€**



¡NUEVO!

Full Curve matrices que abarcan más el diente - perfectas para cavidades grandes.

Fáciles de colocar: la curvatura que poseen mejora la rigidez estructural; además son de acero inoxidable ultrafino.

Fáciles de quitar gracias al recubrimiento antiadherente Slick Bands™ y a la pestaña de agarre oclusal.

Ref.	Contenido	Precio
FXB01	Composi-Tight® 3D Fusion™ Kit de matrices 420 ud. (100x FX100, FX175 y FX200 y 60x FX150 y FX300)	430,00€
BFA-1	Pinzas para matrices (pág. 31)	129,00€

Composi-Tight® 3D Fusion™
Firm Matrix Bands

NOVEDAD



FX-HHF-00

DENTAL ADVISOR 2019 TOP AWARD WINNER
DENTAL ADVISOR TOP AWARD
SECTIONAL MATRIX

Las nuevas matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm resisten la deformación casi un 70% más que otras matrices, manteniendo un espesor súper delgado de 0,038 mm.

Precio: 449,00 €

Todos los kits vienen con una garantía de devolución del dinero de 60 días. **

Ref.	Contenido	Precio
FX-HHF-00 Kit de introducción	1 anillo Composi-Tight® 3D Fusion™ azul 1 anillo naranja Composi-Tight® 3D Fusion™ 1 anillo verde ancho Composi-Tight® 3D Fusion™ 80 cuñas surtidas Composi-Tight® 3D Fusion™ en 4 tamaños 70 matrices firmes Composi-Tight® 3D Fusion™ surtidas en 5 tamaños 1 pinza porta-anillos mejorada en acero procesado	€ 449,00
FX-HHF-40	1 anillo Composi-Tight® 3D Fusion™ azul 1 anillo naranja Composi-Tight® 3D Fusion™ 1 anillo verde ancho Composi-Tight® 3D Fusion™ 40 cuñas surtidas Composi-Tight® 3D Fusion™ en 4 tamaños 40 matrices firmes Composi-Tight® 3D Fusion™ surtidas en 5 tamaños 1 pinza porta-anillos mejorada en acero procesado	€ 425,00

Nuevo: Pídelo online
más fácil, más rápido y más seguro
http://catalogue.garrisondental.net/es

**Si no está satisfecho, simplemente devuelva el kit a través de su depósito y recibirá un crédito total.

Nueva tecnología eZ-Place™

¡NUEVO!

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm Matrix Bands

Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm bandas matrices con tecnología eZ-Place™ para una colocación más fácil.

	Premolar	Pequeño-cervical	Molares y premolares pequeños	Molar	Molar con extensión subgingival
Espesor de 0,038 mm					
Reposición					
código	**FXH100**	**FXH150**	**FXH175**	**FXH200**	**FXH300**
altura	4,3 mm	6,0 mm	5,3 mm	6,1 mm	7,7 mm
uds.	100 ud.	100 ud.	100 ud.	100 ud.	100 ud.
precio	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 90,00
Estándar					
código	**FXH100-M**	**FXH150-M**	**FXH175-M**	**FXH200-M**	**FXH300-M**
altura	4,3 mm	6,0 mm	5,3 mm	6,1 mm	7,7 mm
uds.	50 ud.	50 ud.	50 ud.	50 ud.	50 ud.
precio	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00



Kit de matrices rígidas surtidas: 5 tamaños

FXHB04 **€ 235,00**

Todos los tamaños de matrices también en un pack de recambios con 150 matrices por

FXHB05 **€ 125,00**

Posicionamiento fácil con tecnología eZ-Place™: Resiste la deformación de las bandas matrices un 70% mejor que las matrices blandas típicas

El acero inoxidable especialmente procesado garantiza que las bandas matrices no se doblen cuando se insertan.

Ideal para espacios estrechos en el área interproximal.

Composi-Tight® 3D XR

Sistema de matrices seccionales




Precio: € 409,00

premolares y caninos





molares

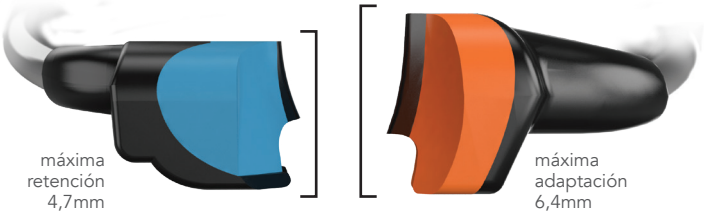

El anillo de la matriz seccional Composi-Tight® Soft-Face™ 3D XR es altamente retentivo y está diseñado para su uso en dientes más cortos o malposicionados, y en las zonas entre el canino y el primer premolar.

El anillo Soft-Face™ 3D naranja ofrece una colocación extremadamente sencilla, se adapta a las diferentes anatomías dentarias y reduce los desbordamientos.

Kit	Contenido	Precio
3D-KMW-00	Kit de inicio 3D-KMW-00 con bandas matrices y cuñas con aplicador. 1 Anillo Soft-Face™ 3DXR 2 Anillos Soft-Face™ 3D 100 Composi-Tight® 3D Matrices 100 Wedge Wands® cuñas 1 Pinza mejorada para la colocación de los anillos	€ 409,00

Anillos	Descripción	Cantidad	Precio
3D500	Anillos Soft-Face™ (naranja)	2 ud.	€ 185,00
3DXR	Anillos extrarretentivos Soft-Face™ (azul)	2 ud.	€ 190,00

Todos los kits incluyen una garantía de devolución del dinero de 60 días. Adquiera hoy su kit enviando un correo electrónico a info@garrisondental.net, llamando al número 800 600 721 ó enviándonos el formulario de pedido por fax al 800 600 722.

Composi-TightGold®

Sistema de matrices seccionales AUK 2 - Kit Gold:

La segunda generación del sistema Composi-Tight®
sigue siendo muy apreciada por muchos dentistas.




Dr. Martin Able, USA

"Composi-Tight Gold® es una matriz excelente y ahora aún mejor para conseguir unos contactos estrechos y predecibles con unos contornos anatómicos. Es referencia en la odontología moderna para las restauraciones de composite. Hay algunos productos imprescindibles para mi trabajo, y las matrices Composi-Tight y las cuñas Wedge Wands® son dos de ellos."



AUK2

Kit	Descripción	Precio
AUK2	Kit del sistema Gold 250 Bandas matrices (100x AU100, AU200; 25x AU150, AU300) 6 G-Rings™ (3 longitud estándar, 3 con puntas alargadas) 1 Pinzas para la colocación de anillos	435,00€

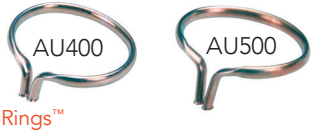

Artículo G-Rings™			
AU400	Anillos G-Rings™ con puntas de longitud estándar	3 ud.	91,00€
AU500	Anillos G-Rings™ con puntas alargadas	3 ud.	91,00€
AUMRDF-100	Pinzas para la colocación de anillos		71,00€

Composi-Tight Gold® espesor 0,035 mm	AU050	AU100	AU150	AU200	AU300
Usadas habitualmente para:	pediátrico 3,2 mm 50 ud./pa.	premolar 4,6 mm 100 ud./pa.	premolar con ext. 3,8 mm 50 ud./pa.	molar alto 6,4 mm 100 ud./pa.	molar alto con ext. 6,4 mm 50 ud./pa.

Composi-Tight Gold® Bandas **69,00€ por paquete**

Composi-Tight®


Sistema de matrices seccionales K102 - Kit original:

Nuestro sistema original se ha convertido en la referencia para unos contactos estrechos y anatómicos.



K102

Kit	Descripción	Precio
K102	Kit del sistema Original 225 Bandas matrices (100x B100, B200; 25x B300) 7 G-Rings™ (4 longitud estándar, 3 con puntas alargadas) 1 Pinzas para la colocación de anillos	385,00€

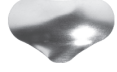Composi-Tight® espesor 0,035 mm	 B050	 B100	 B150	 B200	 B300
Usadas habitualmente para:	pediátrico 3,2 mm 50 ud./pa.	premolar 4,6 mm 100 ud./pa.	premolar con ext. 3,8 mm 50 ud./pa.	molar alto 6,4 mm 100 ud./pa.	molar alto con ext. 6,4 mm 50 ud./pa.

Composi-Tight® Bandas **63,00€ por paquete**





Anillos G-Rings™

G100	G-Rings™ con puntas de longitud estándar	3 ud.	80,00€
G200	G-Rings™ con puntas alargadas	3 ud.	80,00€


AUMRDF-100 / MRDF-100	Pinzas para la colocación de anillos	71,00€

PerForm
Proximal Contact Instruments







Cómo funciona PerForm:

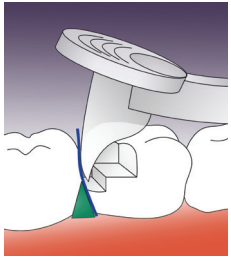

PASO 1:
Aplique el primer incremento de composite. Presione el instrumento PerForm sobre el incremento de composite sin polimerizar y apriete hacia distal (fig. 1)

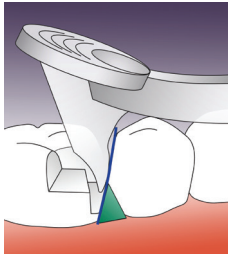

o hacia mesial (fig. 2).

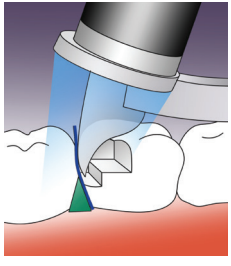

PASO 2:
Posicione la lámpara de polimerización directamente sobre el relieve de la lente polimerice.

Con PerForm™ usted tiene el control.

- Mejora los contactos con todos los sistemas de matrices
- Controla la altura y la anchura de los contactos
- Aumenta el ajuste de los contactos
- Su lente exclusiva controla la difusión de la luz de polimerización

PerForm™

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio
CFK01	PerForm™ Set de introducción 2 tamaños (1 de cada)	2 ud.	96,00€
CF100	instrumentos con puntas pequeñas (1,1 mm)	2 ud.	96,00€
CF200	instrumentos con puntas grandes (2,0 mm)	2 ud.	96,00€

"Para asegurar un punto de contacto fuerte, se colocó composite bulk-fill fluido en la caja proximal y se presionaba el PerForm contra el diente adyacente.

Esto asegura un contacto estrecho y correctamente moldeado durante la polimerización."

Dr. Jack D. Griffin, Jr. USA

Bandas Firm

Composi-Tight® 3D Fusion Firm™ — Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™ Firm

0,038 mm de espesor

Dientes temporales	Premolares	Premolares con prep. cervicales profundas	Premolares y molares pequeños	Molares	Molares con prep. cervicales profundas
Altura					
NA	FXH100 4,3 mm	FXH150 6,0 mm	FXH175 5,3 mm	FXH200 6,1 mm	FXH300 7,7 mm



código	Estándar (-M) Ud.	Precio	Ahorro Ud.	Precio
FXH100	50	€ 50,00	100	€ 90,00
FXH150	50	€ 50,00	100	€ 90,00
FXH175	50	€ 50,00	100	€ 90,00
FXH200	50	€ 50,00	100	€ 90,00
FXH300	50	€ 50,00	100	€ 90,00

Bandas FX

Composi-Tight® 3D Fusion™ — Matrices Composi-Tight® 3D Fusion™

0,038 mm de espesor

Altura					
NA	FX100 4,4 mm	FX150 6,0 mm	FX175 5,6 mm	FX200 6,6 mm	FX300 8,7 mm



código	Estándar (-M) Ud.	Precio	Ahorro Ud.	Precio
FX100	50	€ 52,50	100	€ 95,00
FX150	30	€ 52,50	60	€ 95,00
FX175	50	€ 52,50	100	€ 95,00
FX200	50	€ 52,50	100	€ 95,00
FX300	30	€ 52,50	60	€ 95,00

BandasSXR

Slick Bands™ XR — Matrices Slick Bands™ XR

0,038 mm de espesor

Altura					
NA	SXR100 4,6 mm	SXR150 5,4mm	SXR175 5,44 mm	SXR200 6,4 mm	SXR300 8,6 mm



código	Ahorro Ud.	Precio
SXR100	100	€ 85,00
SXR150	60	€ 85,00
SXR175	100	€ 85,00
SXR200	100	€ 85,00
SXR300	60	€ 85,00

Bandas MC

Composi-Tight® 3D Clear — Matrices Composi-Tight® 3D Clear

0,05 mm de espesor


Altura					
NA	MC100 5,0 mm	NA	MC175 5,9 mm	MC200 6,8 mm	NA



código	Ahorro Ud.	Precio
MC100	100	€ 85,00
MC175	100	€ 85,00
MC200	100	€ 85,00

Bandas M

Dientes temporales	Premolares	Premolares con prep. cervicales profundas	Premolares y molares pequeños	Molares	Molares con prep. cervicales profundas
Composi-Tight®	Matrices Composi-Tight® 3D				
0,035 mm de espesor					
Altura	M050 4,2 mm	M100 4,6 mm	M150 5,4 mm	M175 5,5 mm	M200 6,4 mm	M300 8,6 mm

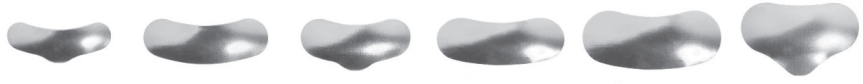

código	Ahorro Ud.	Precio
M050	50	€ 69,00
M100	100	€ 69,00
M150	50	€ 69,00
M175	100	€ 69,00
M200	100	€ 69,00
M300	50	€ 69,00

Bandas AU

Composi-Tight Gold®	Matrices Composi-Tight Gold®				
0,035 mm de espesor					
Altura	AU050 4,2 mm	AU100 4,6 mm	AU150 5,4 mm	NA	AU200 6,4 mm	AU300 8,6 mm



código	Ahorro Ud.	Precio
AU050	50	€ 63,00
AU100	100	€ 63,00
AU150	50	€ 63,00
AU200	100	€ 63,00
AU300	50	€ 63,00

Bandas B

Composi-Tight® Original	Matrices Composi-Tight® Original				
0,035 mm de espesor					
Altura	B050 4,2 mm	B100 4,6 mm	B150 5,4 mm	NA	B200 6,4 mm	B300 8,6 mm



código	Ahorro Ud.	Precio
B050	50	€ 69,00
B100	100	€ 69,00
B150	50	€ 69,00
B200	100	€ 69,00
B300	50	€ 69,00

La combinación de materiales adaptables Soft-Face™,
un núcleo interno firme y características mecánicas avanzadas para producir una cuña que funciona de verdad. En cualquier ocasión.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Ultra Adaptive Wedges



FXK4-M

Un buen agarre
El bloque de agarre universal le proporciona un control absoluto del proceso de colocación de cuñas independientemente de si utiliza un fijador de rollos de algodón, un hemostato o pinzas dobles. Utilice lo que quiera: Composi-Tight® 3D Fusion™ le cubre las espaldas.

Sin molestias dolorosas para el paciente
La punta curvada hacia arriba, similar a la de un esquí, y los suaves bordes redondeados se deslizan sobre el dique de goma o la papila para evitar traumatismos durante la inserción.



Las aletas adecuadas
Las aletas retentivas blandas se doblan hacia abajo durante la inserción de la cuña y después vuelven a su posición original tras su desinserción. Que las cuñas se salgan de su posición es cosa del pasado.


Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedges

Set	Descripción	Contenido	Precio
FXK4-M	Kit de cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™ 200 cuñas, 50 de cada tamaño	200 ud.	99,00€
FXK4	Kit de cuñas Composi-Tight® 3D Fusion™ 400 cuñas, 100 de cada tamaño	400 ud.	191,00€

Reposiciones

FXYL	Extra-pequeña amarilla	100 ud.	51,00€
FXBL	Pequeña azul	100 ud.	51,00€
FXOR	Mediana naranja	100 ud.	51,00€
FXGR	Grande verde	100 ud.	51,00€

Duras por dentro
Su firme esqueleto interno permite una inserción fácil y la separación de los dientes es exactamente igual que una cuña tradicional.

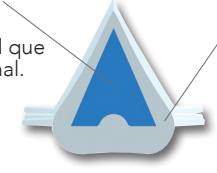

Verdadera flexibilidad
La cobertura externa Soft-Face™ de Composi-Tight® 3D Fusion™ le permite hacer lo que ninguna otra cuña: adaptarse con precisión a las irregularidades interproximales.


WedgeWands



Wedge Wands® también disponibles en versión Cure-Through

Permanece. El cuerpo texturizado de la cuña y la inclinación lateral gradual evitan que se salga hacia atrás.

Delicadeza.La punta, similar a la de un esquí, impide que la cuña perfore el dique de goma o que dañe la papila durante la inserción, y los suaves bordes redondeados evitan el trauma durante la inserción y la desinserción.

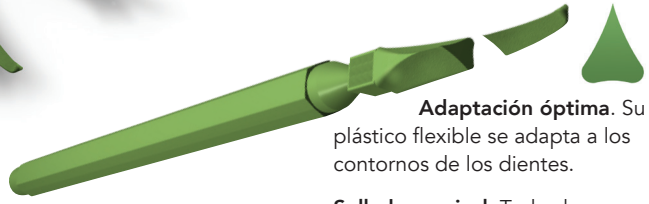

Adaptación óptima. Su plástico flexible se adapta a los contornos de los dientes.

Sellado cervical. Todos los ángulos y los planos son una curva continua para imitar la anatomía interproximal y eliminar los puntos planos.

Longitud perfecta. Gracias al aumento más gradual de la anchura de las cuñas Wedge Wands y G-Wedge, la colocación del anillo y de la matriz resulta más sencilla, la cuña no se sale y se necesitan menos tamaños de cuñas.

Wedge Wands® opaco

Kits	Descripción	Cantidad	Precio
WK4	Wedge Wands™ kit 100 ud. de/cada tamaño	400 ud.	133,00€

Repuestos Opaque

SWYL	Reposición extra-pequeña	100 ud.	35,00€
SWBL	Reposición pequeña azul	100 ud.	35,00€
SWOR	Reposición media naranja	100 ud.	35,00€
SWGR	Reposición grande verde	100 ud.	35,00€

CURE THROUGH WedgeWands

Cure-Through



WCK4

Wedge Wands® transparentes


Kits	Descripción	Cantidad	Precio
WCK4	Clear Wedge Wands™ kit 100 ud. de/cada tamaño	400 ud.	133,00€

Repuestos Opaque

SWCYL	Reposición extra-pequeña	100 ud.	35,00€
SWCBL	Reposición pequeña azul	100 ud.	35,00€
SWCOR	Reposición media naranja	100 ud.	35,00€
SWCGR	Reposición grande verde	100 ud.	35,00€

A+Wedge™



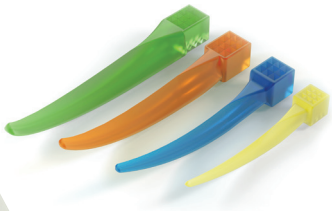

GWAK4

La novedosa A+ Wedge controla la hemorragia gingival, incrementando la limpieza y la velocidad de las restauraciones. Además de adaptarse de manera natural a los contornos de los dientes y de imitar la anatomía interproximal, las cuñas A+Wedges están revestidas con sulfato de aluminio con efecto astringente en la encía. Las cuñas están diseñadas para evitar que se salgan, y son lo suficientemente largas para permitir una colocación correcta de la matriz.

A+Wedge™

Kits	Descripción	Cantidad	Precio
GWAK4	A+ Wedge™ kit 50 ud. de/cada tamaño	200 ud.	81,00€

Repuestos			
GWAYL	Reposición extra-pequeña	100 ud.	41,00€
GWABL	Reposición pequeña azul	100 ud.	41,00€
GWAOR	Reposición media naranja	100 ud.	41,00€
GWAGR	Reposición grande verde	100 ud.	41,00€

SoftWedge™

Adaptación y sellado





WDK4

La primera cuña diseñada para usarse con un sistema de matrices seccionales

Las cuñas Soft Wedges™ son cuñas interdentales de madera de tilo que han sido optimizadas para su uso con materiales restauradores modernos. La capacidad de compresión durante la inserción y su posterior aumento de volumen para ayudar a rellenar los huecos garantizan unas cavidades limpias y secas; ¡un producto indispensable para las restauraciones adheridas actuales!

Soft Wedge™

Kits	Descripción	Cantidad	Precio
WDK4	Soft Wedge™ kit 100 ud. de cada tamaño	400 ud.	82,00€

Repuestos			
WDYL	Reposición extra-pequeña	300 ud.	61,00€
WDBL	Reposición pequeña azul	300 ud.	61,00€
WDOR	Reposición mediana naranja	300 ud.	61,00€
WDGR	Reposición grande verde	300 ud.	61,00€

DaringWHITE™ Professional Teeth Whitening

Caso clínico



"Gracias a las tiras blanqueadoras dentales profesionales Daring White, finalmente es posible que los pacientes obtengan los mismos resultados que con los sistemas tradicionales de férulas de blanqueamiento. No es necesario realizar férulas personalizadas: los pacientes pueden comenzar su tratamiento desde su primera visita a la clínica dental."

Dr. Adrien Lavenant, Aix en Provence, Francia

1. Toma de color antes del tratamiento.

2. Toma de color después del tratamiento.

3. El paciente puede aprender fácilmente el posicionamiento de las tiras en la clínica, para usarlas en casa de forma independiente.

Antes



Después











Antes

Después

DaringWHITE™
Professional Teeth Whitening






Cómo funciona Daring White™

Siga estos simples pasos:

1. Verifique que el paciente sea un candidato válido para el blanqueamiento dental.
2. Tome el color actual de los dientes usando una guía de color dental y anótelo en el registro del paciente.
3. Explíquele al paciente que puede ver varios cambios de color al final del tratamiento.
4. Aplique la primera tira en el sillón. El paciente la usará durante 1-2 horas.
5. Entregue las tiras restantes al paciente para usarlas en casa durante los siguientes 5-10 días, dependiendo de la cantidad de tratamientos en el paquete.

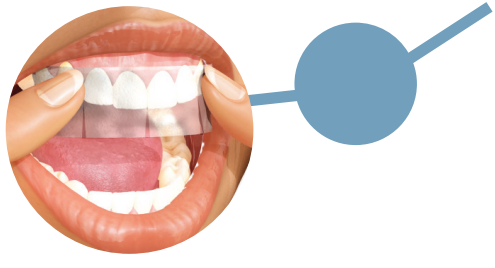

El producto debe almacenarse
a una temperatura entre 1 y 8°C

DaringWHITE™
Professional Teeth Whitening

Tiras de blanqueamiento dental profesional domiciliario para sus pacientes



- Al usar una tecnología patentada y avanzada, los pacientes verán los resultados de su blanqueamiento visibles en 5-10 días
- Una formulación segura y estable de peróxido de carbamida al 15% le proporcionará resultados estéticos con una sensibilidad mínima
- Significativamente menor tiempo de sillón que con las cubetas / sistemas de blanqueamiento tradicionales
- Los agentes blanqueadores activos están incrustados en la tira eliminando la necesidad de cubetas y geles
- La tecnología Comfort-Fit permite que las tiras se adhieran y se ajusten con precisión a los dientes
- A los pacientes les encantará cómo las tiras casi invisibles de Daring White les permiten hablar, reír e incluso beber líquidos fríos cómodamente
- Resultados de blanqueamiento que duran hasta la próxima revisión.

Por qué a sus pacientes les encantará.



Pasemos a las cuestiones técnicas:
Daring White™ blanquea los dientes tanto sobre como debajo de la superficie del esmalte. Dado que el esmalte es poroso, los agentes de tinción se abren camino hacia el interior de los dientes, a ese nivel sus pacientes no pueden eliminarlos. Las tiras de blanqueamiento Daring White™ contienen agentes blanqueadores (peróxido de carbamida) que abren los poros de los dientes y penetran en el esmalte para llegar a las moléculas de tinción. Las moléculas de oxígeno de los agentes blanqueadores descomponen las manchas. Como resultado, sus pacientes tienen una sonrisa más blanca.

Perfecto para sus pacientes más ajetreados y para crear su nueva y emocionante consulta

DaringWHITE™
Professional Teeth Whitening



Kit de 10 tratamientos Daring White™ (10 días) **DWK03** para 3 pacientes (10 días cada uno) por sólo

210,00€

Sabor a menta natural, productos para pedido:

Código	Nombre/ Concepto	Número de pacientes	Uso	Precio*
DWK03	Kit de introducción Daring White con 10 packs de tratamiento	3	Tratamiento de blanqueamiento completo (10 días)	210,00 €*
DWK04	Kit completo Daring White con 10 packs de tratamiento	6	Tratamiento de blanqueamiento completo (10 días)	420,00 €*
DWK01	Kit de introducción Daring White con 5 packs de tratamiento	6	Retoque (5 días)	210,00 €*
DWK02	Kit completo Daring White con 5 packs de tratamiento	12	Retoque (5 días)	420,00 €*

*los precios no incluyen IVA

Materiales de marketing a su disposición:

Llame para solicitar el envío de estos materiales de marketing gratuitos para ayudarle a desarrollar su práctica profesional. Colóquelos en todos sus gabinetes y sala de espera:

- Folletos para pacientes y expositores para la recepción
- Carteles
- Álbum de diapositivas / Vídeo
- Información disponible a través del correo electrónico

Registre online su consulta para ayudar a los pacientes a encontrar una clínica cercana que les ofrezca el tratamiento con Daring White™ en DaringWhite.com

DaringWHITE™
Professional Teeth Whitening



Haga crecer su consulta

Haga crecer su número de pacientes y sus ingresos incorporando Daring White a su oferta de servicios. A sus pacientes les encantará la facilidad de llevar las tiras blanqueadoras en su propia casa, su comodidad y el resultado de las sonrisas, mientras usted disfruta de un alto margen de beneficios con Daring White™ y sus fáciles ventas.

Beneficios para la consulta:

- Fácil aceptación de presupuestos con un elevado margen
- Las sonrisas Daring White™ pueden generar altos ingresos en casos de estética dental
- Usar antes de intervenciones estéticas para obtener un resultado estético favorable
- Sus pacientes mostrarán a sus amigos la hermosa sonrisa que usted ayudó a crear, generando así más referencias para su consulta
- Producto de gran reclamo para atraer a nuevos pacientes



Comience entregando a sus pacientes un kit de 10 tratamientos de Daring White™ para ayudarles a eliminar manchas de hace años. Haga un seguimiento con un kit de retoque con 5 tratamientos cuando vengan a su próxima revisión para evitar nuevas manchas.

FitStrip™ Flexible Interproximal Twistable

Sistema de contorneado y acabado interproximal FitStrip™



FPSK05

- Sierras interproximales y tiras abrasivas recubiertas de diamante con mango intercambiable para un uso sencillo y seguro en la boca del paciente
- Una simple rotación de la rueda de plástico le da a las tiras una forma recta o curvada y, por ello, son perfectas para:
  - el acabado y el modelado del contorno de empastes de composite (forma curvada)
  - la separación del punto de contacto antes o después de la restauración (forma recta)
- Ideales para la reducción de esmalte interproximal (IPR) en métodos de tratamiento de ortodoncia como Invisalign™ o Six Month Smiles™
- Se puede desinfectar y esterilizar en autoclave en múltiples ocasiones



Ref.	Contenido	Precio
FPSK04	10 tiras (1 de una cara y 1 de doble cara por cada granulación–5 tamaños de grano) 2 mangos 1 medidor de espesor	€ 160,00
FPSK05	10 tiras (2 de doble cara por cada granulación–5 tamaños de grano) 2 mangos 1 medidor de espesor	€ 160,00
FPSK01	2 mangos 2 tiras FitStrips™ serradas 4 tiras FitStrips™ de una cara (1 de cada granulación) 4 tiras FitStrips™ de doble cara (1 de cada granulación)	€ 155,00

FitStrip™ Flexible Interproximal Twistable

Sistema de contorneado y acabado interproximal FitStrip™



FPSGAUGE
Medidor de espesor IPR!
Precio 46,00 €

FitStrip™ Repuesto

FitStrip™: tamaños individuales contenidos en el kit

tiras de una cara						**FPSSAW-4** 0,05 mm **Serrada**
Ref.	**FPSXFSS-4**	**FPSFSS-4**	**FPSMSS-4**	**FPSCSS-4**		
Espesor	0,08 mm	0,10 mm	0,13 mm	0,18 mm		
	Superfina/amarilla 15 µm	**Fina / rojo** 30 µm	**Media / azul** 46 µm	**Áspera / verde** 90 µm	**Media/ blanca**	**Media/ negra**
tiras de doble cara						
Ref.	**FPSXFDS-4**	**FPSFDS-4**	**FPSMDS-4**	**FPSCDS-4**	**FPSTMDS-4** 0,40 mm Media/blanca	**FPSXTMDS-4** 0,50 mm Media/negra
Espesor	0,11 mm	0,15 mm	0,21 mm	0,30 mm		

Todos los tamaños pueden encargarse por separado. Llámenos si está interesado.

Los recambios de FitStrip™ contienen 4 tiras de un tamaño cada una intercambiables.

Los recambios de FitStrip™: **Precio: 72,00€**

eZr™
Intra-oral Adjustment/Polishing for Zirconia and Lithium Disilicate

Los novedosos pulidores eZr™ de Garrison permiten a los odontólogos hacer ajustes de manera sencilla y segura, y pulir el circonio y el disilicato de litio para reducir la probabilidad de astillamiento y las microfisuras.



1. Se empieza con la remoción gruesa y el contorneado con las puntas abrasivas azules de grano grueso. El cono de extremo plano se emplea para la superficie oclusal/labial/lingual/vestibular, y el disco para las superficies interproximales.



2. Utilizar el pulidor verde de grano medio para alisar y prepulir. Emplear la punta para los surcos oclusales, la copa para la superficie labial/lingual/vestibular, y el disco para las superficies interproximales.



3. Usar los pulidores naranjas de grano fino para el pulido de alto brillo. Emplear la punta para los surcos oclusales, la copa para la superficie labial/lingual/vestibular, y el disco para las superficies interproximales.





FPZK01-X - eZr™ Kit

FPZK01-X – eZr™ Kit

Kit de introducción completo con
2 puntas abrasivas y 6 pulidores
2 puntas abrasivas para remoción gruesa (azul)
3 pulidores para alisado y prepulido (verde)
3 pulidores para pulido de alto brillo (naranja)

Precio: 175,00€

eZr™ hace ajustes más fáciles para Usted!

El modo de tratar correctamente el circonio es, desde hace tiempo, un tema muy controvertido debido al riesgo de microfisuras. Ahora es posible acabar las restauraciones con los instrumentos adecuados y conseguir un resultado estable a largo plazo.

El sistema de pulido eZr™ proporciona la solución para el tratamiento, porque no sólo permite obtener un acabado de alto brillo en el circonio sino que, además, aumenta la estabilidad física del material a través del pulido. Ahora se pueden lograr superficies de circonio muy pulidas y estables . La larga vida útil de los pulidores unida al elevado índice de remoción de material permite ofrecer un sistema de tratamiento económico y rápido para obtener un acabado brillante en segundos sin usar pastas pulidoras.

- Permite hacer ajustes sencillos y rápidos en el circonio y el disilicato de litio.
- El pulidor patentado impregnado con diamante reduce la posibilidad de astillamiento y de microfisuras.
- Proporciona una superficie oclusal pulida inigualablemente lisa para la dentición antagonista.
- Evita el sobrecalentamiento y el posible fracaso prematuro asociado a él.
- Elimina la necesidad de usar pasta pulidora, reduciendo los costes generales del procedimiento.

	Referencia	Descripción	Granulación	Precio
	FPZC030-X	Disco de grano grueso azul para la remoción gruesa, 5 uds./envase	Remoción gruesa	138,00€
	FPZC010-X	Punta abrasiva cónica de extremo plano y grano grueso para la remoción gruesa, 5 uds./envase	Remoción gruesa	104,00€
	FPZM010-X	Punta pulidora pequeña de grano medio verde, 5 uds./envase	Alisado y prepulido	43,00€
	FPZM020-X	Punta pulidora grande de grano medio verde, 5 uds./envase	Alisado y prepulido	65,00€
	FPZM030-X	Disco pulidor de grano medio verde, 5 uds./envase	Alisado y prepulido	65,00€
	FPZM040-X	Copa pulidora de grano medio verde, 5 uds./envase	Alisado y prepulido	65,00€
	FPZF010-X	Punta pulidora fina de grano fino naranja, 5 uds./envase	Pulido de alto brillo	43,00€
	FPZF020-X	Punta pulidora grande de grano fino naranja, 5 uds./envase	Pulido de alto brillo	65,00€
	FPZF030-X	Disco pulidor de grano fino naranja, 5 uds./envase	Pulido de alto brillo	65,00€
	FPZF040-X	Copa pulidora de grano fino naranja, 5 uds./envase	Pulido de alto brillo	65,00€

BlueView VariStrip™

Nuestra matriz más popular para el sector anterior



Anchura variable de 6 mm a 10 mm, la altura perfecta para todos los dientes anteriores.

La Blue View VariStrip™ es una revolucionaria matriz anterior contorneada que proporciona una curvatura óptima y una altura de matriz para prácticamente cualquier restauración anterior. La delgada tira anatómica de plástico de 0,05 mm de espesor se estrecha de un extremo al otro. Puede colocar la banda interdentalmente, y después deslizarla hasta conseguir la altura exacta del diente. Su conformado permite una sencilla reconstrucción de la anatomía ocluso-gingival, evitando así la aparición de troneras y de puntos de contacto planos.

Forma curvada: proporciona la curvatura óptima para prácticamente cualquier restauración anterior.

Color azul: proporciona contraste entre la matriz y la anatomía dental sin afectar a la polimerización del composite.

Blue View VariStrip™

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio
VS02	VariStrip™	50 ud.	74,00€
VS01	VariStrip™	100 ud.	98,00€



Dr. Martin von Sontagh, Austria

- Evita los contactos muy planos, los triángulos negros y que la comida se quede atrapada, como sucedía en ocasiones con los antiguos mylars rectos.
- Excelente para las restauraciones de clase IV, el cierre de diastemas,etc.




Dr. Gabriele Conte, Italia

SlickBands™ Tofflemire-style


Tecnología antiadherente desarrollada por Garrison: Los agentes adhesivos modernos se pueden adherir a las bandas matrices no revestidas - las bandas Slick Bands se retiran sin problemas.



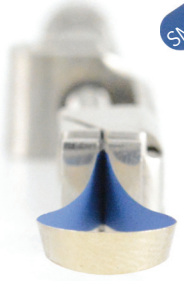

Margin Elevation Band


Una matriz para la elevación del margen le proporcionará la mejor adaptación gingival y el contorno ideal para las zonas de márgenes profundos. La altura de la matriz para la elevación del margen se ha reducido para mejorar la adaptación a las zonas de márgenes profundos.

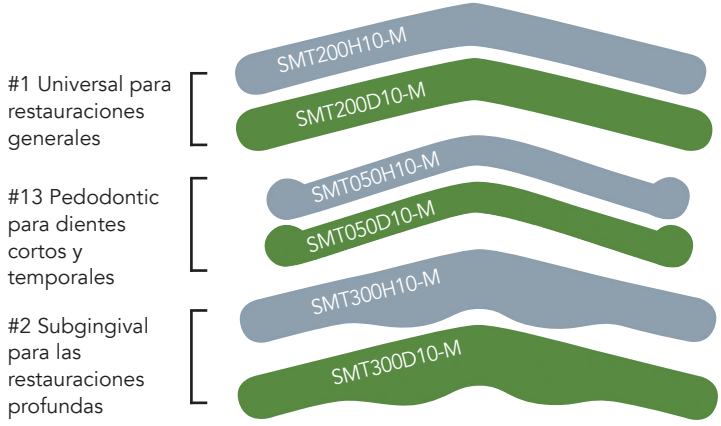

#1 Universal para restauraciones generales

#13 Pedodontic para dientes cortos y temporales

#2 Subgingival para las restauraciones profundas

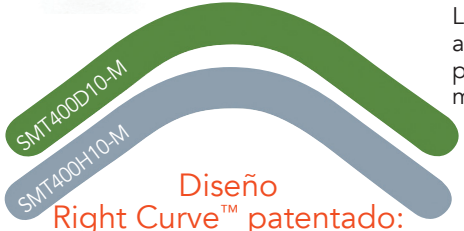

Diseño Right Curve™ patentado:

El aumento de la curvatura de la novedosa matriz Right-Curve asegura un excelente sellado gingival y permite llegar más fácilmente hasta los dientes adyacentes para unos contactos más amplios y profundos. Esto crea una forma de embudo más marcada cuando la banda se coloca alrededor de la pieza dental. Es la elección correcta para muchas restauraciones.

Llega hasta el diente adyacente con mayor facilidad para ayudarle a crear contactos más altos y profundos.



Un sellado gingival más hermético es beneficioso para todas las restauraciones.

Slick Bands™

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio
Bandas Blandas con revestimiento antiadherente			
SMT400D10-M	Right-Curve	50 ud.	42,00€
SMT200D10-M	#1 Universal Tofflemire	50 ud.	32,50€
SMT050D10-M	#13 Pedodontic	50 ud.	32,50€
SMT300D10-M	#2 Subgingival	50 ud.	32,50€
Bandas Regular con revestimiento antiadherente			
SMT400H10-M	Right-Curve	50 ud.	41,00€
SMT200H10-M	#1 Universal Tofflemire	50 ud.	28,50€
SMT050H10-M	#13 Pedodontic	50 ud.	28,50€
SMT300H10-M	#2 Subgingival	50 ud.	28,50€
Bandas Regular con revestimiento antiadherente			
SMT500H10-M	Margin Elevation Band	50 ud.	47,00€

Composi-Tight® 3D Fusion™

Con Composi-Tight® 3D Fusion™ también obtiene el primer porta-anillo de acero inoxidable para odontología.Empuñadura mejorada para abrir fácilmente los anillos con menor fatiga de la mano, incluso sobre los molares grandes. Las puntas rodean al anillo para que no se produzcan temblores ni se escurra el anillo.

Se puede usar con todos los anillos de matrices seccionales habituales.






Composi-Tight® 3D Fusion™
Pinzas para la colocación de anillos
FXP01 € 87,00

Ring Placement Forceps

Holds all your sectional matrix system rings.

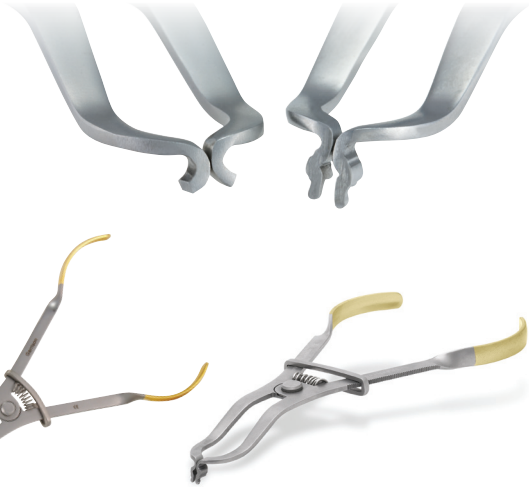

Pinzas para la colocación de anillos
AUMRDF-100 € 71,00

Pinzas universales
ideales también para los clamps del dique de goma
UNVF-100 € 82,00





Composi-Tight® Matrix Forceps

Precise Placement, Unbeatable Grip.



El agarre lo tiene todo. Las matrices se pueden quitar fácilmente sin esfuerzo.



Colocación precisa: Las puntas tienen un ángulo de 75 grados con una orientación gingivo-oclusal que permiten una mejor colocación que con las pinzas de algodón. Las finas puntas de metal duro permiten agarrar la matriz por su borde superior para evitar la deformación de la zona interdental de la banda.



Agarre inigualable: Las puntas de carburo de tungsteno proporcionan un agarre excepcional y control táctil en los casos de acceso difícil.

Pinza para matrices

BFA-1	Pinza para matrices	€ 129,00

CompositeInstruments

Nonstick titanium-nitride coated

Nuestros instrumentos multifuncionales tienen dos extremos activos: uno con un condensador doble y otro con espátulas para modelar. ¡Ahora puede aplicar, condensar, modelar y bruñir para conseguir unas restauraciones de composite perfectamente contorneadas sin necesidad de cambiar de instrumento!

- Mangos de gran diámetro y ligeros para una mejor ergonomía.
- Con superficie antiadherente para aplicar y modelar los composites.
- 40% más dúctil que los instrumentos de acero, y con una superficie no porosa y antiadherente.
- Admite diferentes métodos de limpieza/ esterilización, además de la limpieza ultrasónica.



TN009,
Louis Mackenzie,
UK



TN008

5 en 1

Artículo	Descripción	Precio
TN008	Instrumento multifuncional 5 en 1 2 condensadores, bruñidor de bola, espátula, bruñidor cónico	101,00€



TN009

5 en 1

Artículo	Descripción	Precio
TN009	Instrumento multifuncional 5 en 1 2 espátulas, 2 condensadores, bruñidor cónico	101,00€

CompositeInstruments

Nonstick titanium-nitride coated

Instrumentos para composites

TN001



Artículo	Descripción	Precio
TN001	Hojas Medias	41,00€

- Aplicación del composite
- Retracción gingival para condensar por debajo de los márgenes gingivales
- Bruñido de las matrices

TN002



TN002 Hoja Media con obturador Medio 41,00€

- Contorneado de restauraciones pequeñas de clase I, II, V
- Compactación del composite en preparaciones conservadoras
- Bruñido de las matrices

TN003



TN003 Espátula Media con obturador Grande 47,00€

- Contorneado de restauraciones grandes de clase I, II, V
- Compactación del composite en preparaciones grandes
- La punta convexa del obturador minimiza el arrastre del composite

CompositeInstruments Nonstick titanium-nitride coated

Instrumentos para composites

Artículo	Descripción	Precio
TN004	Espátulas extrafinas	47,00€

- Llega hasta debajo de los márgenes para modelar y condensar
- Esculpe interdentalmente
- Colocación de hilo retractor en el surco gingival

TN004



TN005	Espátulas largas extrafinas	47,00€

- Permite un mejor acceso para el contorneado y modelado posterior
- Esculpe interdentalmente
- Colocación de hilo retractor en el surco gingival

TN005



TN006	Obturador multifuncional pequeño/medio	57,00€

- Aplicación del material en las restauraciones más pequeñas de clase II y III
- Condensa el material hacia los márgenes gingivales.
- Modele la anatomía oclusal con el modelador cónico

TN006



Líderes de opinión que trabajan con productos Garrison



Dra. Silvia del Cid

"La posibilidad de colocar los anillos simultáneamente, me permite realizar las restauraciones de un cuadrante minimizando los riesgos".



Dr. Jon Gurrea

''Los nuevos anillos de Garrison Composi-Tight® 3D Fusion™ son mis nuevos anillos de referencia en cualquier situación, ahora tenemos una mejor adaptación y estabilidad de la matriz. Esto hace que mi procedimiento de acabado interproximal sea mucho más rápido y con mejores resultados.''



Dra. Paula Vaquero

"El sistema FitStrip™ de Garrison permite realizar stripping (IPR) en tratamientos de ortodoncia con alineadores transparentes de una manera altamente predecible, no hay riesgo de lesionar los tejidos blandos y además el diseño del mango aumenta la visión del campo operatorio."

Información general de seguridad

Advertencias:

- Los sistemas Composi-Tight están formados por componentes pequeños cortantes. Se aconseja colocar un dique de goma u otro aislamiento adecuado antes de comenzar el tratamiento. Como sucede con todos los instrumentos intraorales, es preciso tener cuidado a fin de asegurar una manipulación y una colocación estable.
- Aspiración: Si el paciente aspira una matriz, una cuña o un anillo es imprescindible buscar atención médica de manera inmediata.
- Ingestión: Si se produce una ingestión accidental, informe al paciente de que debe acudir al médico para localizar el componente ingerido. Si se producen náuseas o malestar es preciso acudir al médico inmediatamente.

Para más información sobre la seguridad y la esterilización consulte la página: www.garrisondental.com

Instrucciones para la esterilización y la limpieza de los anillos Composi-Tight® 3D Fusion,™ 3D XR y 3D

Esterilización:

- Esterilizar el producto en el autoclave usando solamente bolsas para la esterilización aprobadas por la CE.
- Esterilizar sólo en autoclave. Ejecutar un ciclo de 132 – 134°C y 210 kPa durante 6 minutos con un tiempo de secado de 20-30 minutos; seguir siempre las instrucciones del fabricante. No superar nunca una temperatura de 137 °C.
- NO utilizar procesos de esterilización química.

Limpieza:

- Eliminar todos los residuos visibles antes de la esterilización.
- Para ello, usar un cepillo de nailon o un cepillo blando similar. Es preciso tener cuidado para no dañar la silicona Soft-Face durante la limpieza.
- Si sigue habiendo residuos visibles, repetir el procedimiento anterior.
- NO utilizar soluciones que contengan sustancias químicas como alcohol, acetona, cetona o soluciones químicas desinfectantes agresivas.

Garrison
Dental Solutions



¡NUEVO! Realice su pedido ahora también cómodamente a través de nuestra tienda online en www.garrisondental.com

La entrega es a través de su depósito dental habitual. El registro se lleva a cabo en unos pocos pasos. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por teléfono o por correo electrónico.



Puede comunicarse con nosotros por teléfono entre las 8:00 a.m. y las 17:00 p.m., de lunes a viernes. Si no estamos disponibles para usted, simplemente deje un mensaje con su nombre y número de teléfono y le devolveremos la llamada lo antes posible.
Tel. 800 600721

Garrison
Dental Solutions

Garrison Dental Solutions
Carlstrasse 50
D-52531 Uebach-Palenberg
Alemania
Número gratuito 800-600721
Fax 800-600722
Correo electrónico: info@garrisondental.net
Web: www.garrisondental.com

© 2020 Garrison Dental Solutions, LLC